


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/brazowa-gumka-na-trzymadelku-g04-p-429.html>

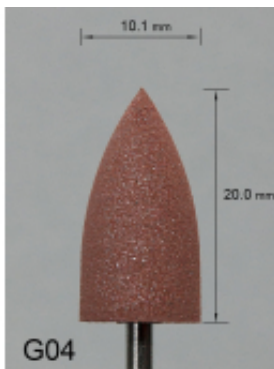

Brązowa gumka na trzymadélku G04

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G04

Opis produktu

Gumka protetyczna G04 brązowa o grubej gradacji – kształt stożkowy.

Specjalistyczna polerka przeznaczona do zgrubnego opracowywania płyt protez wykonanych z akrylu oraz nowoczesnych materiałów elastycznych (takich jak nylon czy acetal). Charakteryzuje się gradacją o grubej ziarnistości, który pozwala na błyskawiczne wyrównanie powierzchni po obróbce frezami i skuteczne usunięcie nadatków materiału.

Dzięki stożkowej formie o wymiarach 10,1 x 20,0 mm, narzędzie zapewnia doskonałą kontrolę podczas formowania kształtu protez oraz dociera do trudniej dostępnych miejsc w obrębie wałów dziąsłowych. Odpowiednio dobrany skład gumy zapobiega "mazaniu się" materiałów elastycznych, co jest kluczowe dla zachowania czystości i precyzji pracy w laboratorium protetycznym.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka wstępna akrylu (gumki do akrylu, zgrubne szlifowanie)
- ✓ Opracowywanie materiałów elastycznych i termoplastycznych (nylon, acetal)
- ✓ Szybkie usuwanie nadatków i wyrównywanie powierzchni płyt protez
- ✓ Nadawanie wstępnego kształtu uzupełnieniom protetycznym

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: gruba
- ☐ Kolor: brązowy
- ☐ Kształt: stożek
- ☐ Średnica robocza: 10,1 mm
- ☐ Długość robocza: 20,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm