


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/czarna-szara-gumka-na-trzymadelku-g02-p-414.html>

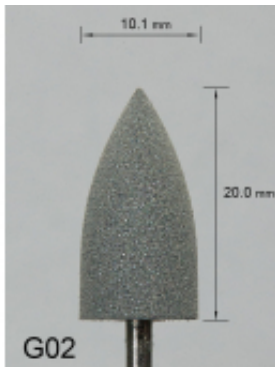

Czarna (szara) gumka na trzymadełku G02

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G02

Opis produktu

Gumka protetyczna G02 czarna/szara o średniej gradacji – kształt stożkowy.

Profesjonalna polerka stomatologiczna zaprojektowana do efektywnego wygładzania protez akrylowych. Posiada średnią ziarnistość, która idealnie sprawdza się podczas usuwania rys powstałych po etapie obróbki zgrubnej, pozostawiając powierzchnię akrylu gładką i przygotowaną do finalnego nabłyszczania.

Dzięki stożkowemu kształtowi oraz optymalnym wymiarom (10x20 mm), instrument pozwala na wygodną pracę zarówno na dużych płaszczyznach płyty protezy, jak i w miejscach trudniej dostępnych.

Zastosowanie:

- ✓ Normalna obróbka akrylu (gumki do akrylu, wygładzanie protez)
- ✓ Usuwanie śladów po frezach węglkowych
- ✓ Opracowywanie płyt protez
- ✓ Technika akrylowa

Specyfikacja:

- Gradacja: średnia
- Kolor: czarny (szary)
- Kształt: stożek
- Średnica robocza: 10,1 mm
- Długość robocza: 20,0 mm
- Trzpień: 2,35 mm