


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/czarna-szara-gumka-na-trzymadelku-g12-p-415.html>

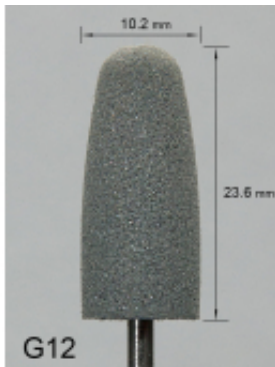

Czarna (szara) gumka na trzymadełku G12

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G12

Opis produktu

Gumka protetyczna G12 czarna/szara o średniej gradacji – kształt długa oliwka.

Profesjonalna polerka stomatologiczna zaprojektowana do efektywnego wygładzania protez akrylowych. Posiada średnią ziarnistość, która idealnie sprawdza się podczas usuwania rys powstałych po etapie obróbki zgrubnej, pozostawiając powierzchnię akrylu gładką i przygotowaną do finalnego nabłyszczania.

Dzięki stożkowemu kształtowi oraz optymalnym wymiarom (10.2x23.6mm), instrument pozwala na wygodną pracę zarówno na dużych płaszczyznach płyty protezy, jak i w miejscach trudniej dostępnych.

Zastosowanie:

- ✓ Normalna obróbka akrylu (gumki do akrylu, wygładzanie protez)
- ✓ Usuwanie śladów po frezach węglkowych
- ✓ Opracowywanie płyt protez
- ✓ Technika akrylowa

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: średnia
- ☐ Kolor: czarny (szary)
- ☐ Kształt: długa oliwka
- ☐ Średnica robocza: 10,2mm
- ☐ Długość robocza: 23,6 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm