


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-ceramiczny-zr035-walcowy-z-zaokrąglonym-koncem-z-krzyżowym-nacięciem-czarno-zielony-pasek-p-323.html>

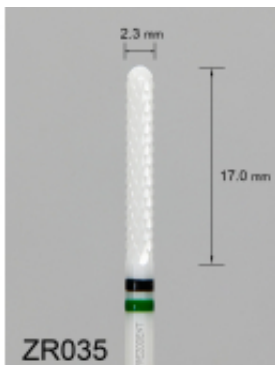

Frez ceramiczny ZR035 walcowy z zaokrąglonym końcem z krzyżowym nacięciem (czarno-zielony pasek)

Cena	52,00 zł
Numer katalogowy	ZR035

Opis produktu

Frez ceramiczny ZR035 walcowy z zaokrąglonym końcem z krzyżowym nacięciem (czarno-zielony pasek) to narzędzie do obróbki miękkich materiałów w technice dentystycznej. Wykonany z tlenku cyrkonu w kolorze białym, zapewnia skuteczne działanie bez przegrzewania powierzchni.

Zastosowanie:

- ✓ Obróbka acetalu, nylonu, akrylu i miękkiego cyrkonu
- ✓ Kształtowanie elastycznych protez
- ✓ Usuwanie nadmiaru materiału
- ✓ Praca bez wiórków i przypaleń

Specyfikacja:

- ☐ Materiał: tlenek cyrkonu (kolor biały)
- ☐ Typ nacięcia: krzyżowe (czarno-zielony pasek)
- ☐ Kształt: walcowy z zaokrąglonym końcem
- ☐ Wymiary: średnica 2,3 mm, długość 17,0 mm, średnica trzpienia 2,35 mm
- ☐ Przeznaczenie: do obróbki miękkich materiałów