


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m022-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-owalny-p-244.html>

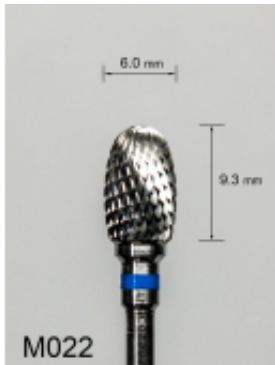

Frez węglkowy M022 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – owalny

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M022

Opis produktu

Frez węglkowy M022 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt owalny.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie jajowatym, niezbędny do szybkiego i kontrolowanego modelowania twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M022 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia wysoką wydajność skrawania, stabilność pracy i efektywne odprowadzanie wiórów. Jego zrównoważone wymiary (Ø 6,0 mm, długość 9,3 mm) są optymalne do zgrubnej, ale precyzyjnej obróbki.

Dzięki **owalnemu (jajowatemu) kształtowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do formowania gładkich, zaokrąglonych powierzchni, opracowywania brzegów oraz usuwania nadlewów z wewnętrznych i zewnętrznych krzywizn. Kształt ten ułatwia płynne przejścia i konturowanie.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka stopów protetycznych, usuwanie nadlewu)
- ✓ Konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie owalnych i zaokrąglonych kształtów)
- ✓ Wygładzanie zaokrąglonych powierzchni i krawędzi
- ✓ Wszelkie prace laboratoryjne wymagające szybkiego usuwania materiału na krzywiznach

Specyfikacja:

- ☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐ Kolor paska: niebieski
- ☐ Kształt: owalny (jajowaty)
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość robocza: 9,3 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm