


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m203-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-kulka-5-mm-p-266.html>

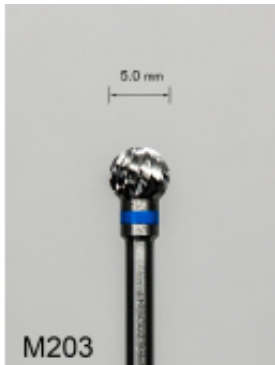

Frez węglkowy M203 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kulka 5 mm

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M203

Opis produktu

Frez węglkowy M203 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt kulki (kuli).

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie idealnej kuli i średnicy 5 mm, stworzony do szybkiej i kontrolowanej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M203 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia efektywne i stabilne skrawanie, minimalizując ryzyko zapychania się. Średnica robocza (**5,0 mm**) gwarantuje **dobrą wydajność** przy usuwaniu materiału i jednocześnie pozwala na większą precyzję niż większe frezy kuliste, co jest kluczowe w modelowaniu detali.

Dzięki **kulistemu kształtowi (5 mm)**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy **opracowywaniu zagłębień, gniazd pod zasuwę, poszerzaniu ubytków oraz modelowaniu płynnych, anatomicznych krzywizn** w podbudowach metalowych i akrylowych.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna i kontrolowana obróbka metalu (frezy do metalu, usuwanie nadlewów)
- ✓ Szybkie usuwanie i konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie anatomicznych kształtów)
- ✓ Opracowywanie zagłębień, gniazd i poszerzanie ubytków o umiarkowanej wielkości
- ✓ Prace laboratoryjne wymagające tworzenia gładkich, kulistych powierzchni

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: kulka (kula)
- ☐☐ Średnica robocza: 5,0 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm