


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcb01-niebieska-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-srednio-gruba-dysk-22-mm-p-465.html>

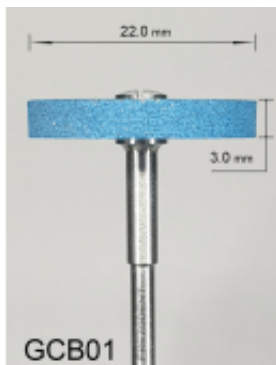

Gumka diamentowa GCB01 (niebieska) do cyrkonu i ceramiki – gradacja średnio-gruba, dysk 22 mm

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	GCB01

Opis produktu

Gumka diamentowa GCB01 – średnio-gruba gradacja (niebieska) do wygładzania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczny dysk **GCB01** posiada ziarno diamentowe zatopione w strukturze spoiwa, co gwarantuje stałą wydajność pracy. Przeznaczony do usuwania rys po wcześniejszych etapach obróbki oraz ujednolicania struktury powierzchni przed polerowaniem średnim.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** zapewnia idealne centrowanie i pracę bez wibracji. Jest to trzeci etap obróbki mechanicznej w systemie polerowania.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępne wygładzanie tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Usuwanie rys po gradacji zielonej i narzędziach ściernych
- ✓ Niwelowanie nierówności w ceramice twardej i kompozytach
- ✓ Przygotowanie powierzchni do polerowania wstępnego (czerwona gradacja)

Specyfikacja:

- ▣ Gradacja: niebieska (średnio-gruba)
- ▣ Kształt: dysk na trzymadełku
- ▣ Średnica: 22 mm / Grubość: 3 mm
- ▣ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm

□□ Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym