


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcb15-niebieska-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-srednio-gruba-soczewka-12-mm-p-474.html>

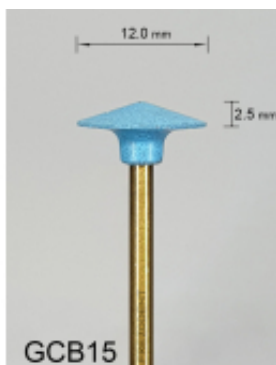

Gumka diamentowa GCB15 (niebieska) do cyrkonu i ceramiki – gradacja średnio-gruba, soczewka 12 mm

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	GCB15

Opis produktu

Gumka diamentowa GCB15 – średnio-gruba gradacja (niebieska) do wygładzania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczna soczewka **GCB15** posiada ziarno diamentowe zatopione w strukturze spoiwa, co gwarantuje stałą wydajność pracy. Przeznaczony do usuwania rys po wcześniejszych etapach obróbki oraz ujednolicania struktury powierzchni przed polerowaniem średnim.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** zapewnia idealne centrowanie i pracę bez wibracji. Jest to trzeci etap obróbki mechanicznej w systemie polerowania.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępne wygładzanie tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Usuwanie rys po gradacji zielonej i narzędziach ściernych
- ✓ Niwelowanie nierówności w ceramice twardej i kompozytach
- ✓ Przygotowanie powierzchni do polerowania wstępnego (czerwona gradacja)

Specyfikacja:

- Gradacja: niebieska (średnio-gruba)
- Kształt: soczewka na trzymadełku
- Średnica: 12 mm / Grubość: 2.5 mm
- Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym