


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcg03-zielona-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-gruba-soczewka-26-mm-p-462.html>

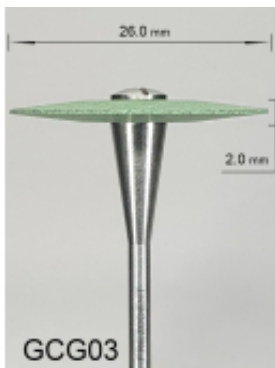

## Gumka diamentowa GCG03 (zielona) do cyrkonu i ceramiki- gradacja gruba, soczewka 26 mm

Cena	<b>95,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GCG03</b>

### Opis produktu

**Gumka diamentowa GCG03** – gruba gradacja (zielona) do wyrównywania powierzchni tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczna soczewka **GCG03** zawiera ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co zapewnia stałe właściwości ściernie. Przeznaczony do usuwania rys po obróbce zgrubnej oraz sprawnego niwelowania nierówności materiału przy zachowaniu kontroli nad kształtem uzupełnienia.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje stabilną pracę bez bicia. Jest to drugi etap obróbki mechanicznej, przygotowujący powierzchnię do wygładzania.

#### Zastosowanie:

- ✓ Wyrównywanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO<sub>2</sub>)
- ✓ Usuwanie śladów po narzędziach rotacyjnych i gradacji czarnej
- ✓ Korekta drobnych detali w ceramice twardej
- ✓ Wstępne wygładzanie konstrukcji protetycznych

#### Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: zielona (gruba)
- ☐ Kształt: soczewka na trzymadełku
- ☐ Średnica: 26 mm / Grubość: 2 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym