


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gck04-czarna-do-cyrkonu-i-ceramiki-soczewka-26-mm-bardzo-gruba-gradacja-p-458.html>

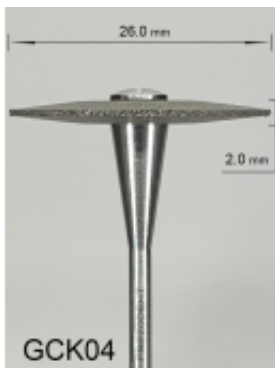

## Gumka diamentowa GCK04 (czarna) do cyrkonu i ceramiki, soczewka 26 mm, bardzo gruba gradacja

Cena	<b>95,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GCK04</b>

### Opis produktu

**Gumka diamentowa GCK04** - najgrubsza gradacja (czarna) do agresywnej obróbki tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczna soczewka **GCK04** posiada ziarno diamentowe zatopione w strukturze spoiwa, co zapewnia stałą siłę cięcia aż do całkowitego zużycia. Przeznaczona do szybkiego usuwania nadmiarów materiału oraz wstępnego konturowania dużych powierzchni bez ryzyka ich przegrzania.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje idealne centrowanie i pracę bez wibracji. Jest to pierwszy etap obróbki mechanicznej w systemie polerowania.

#### Zastosowanie:

- ✓ Intensywna obróbka wstępna tlenku cyrkonu (ZrO<sub>2</sub>)
- ✓ Szybka korekta kształtu i usuwanie nierówności ceramiki
- ✓ Konturowanie mostów i koron

#### Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: czarna (najgrubsza)
- ☐ Kształt: soczewka na trzymadełku
- ☐ Średnica: 26 mm / Grubość: 2 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym