


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcr05-czerwona-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-srednia-soczewka-20-mm-p-482.html>

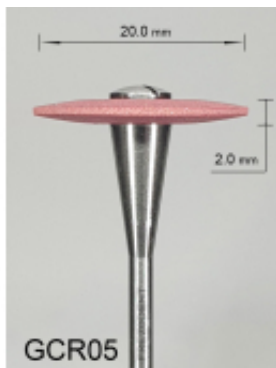

Gumka diamentowa GCR05 (czerwona) do cyrkonu i ceramiki- gradacja średnia, soczewka 20 mm

Cena	75,00 zł
Numer katalogowy	GCR05

Opis produktu

Gumka diamentowa GCR05 – średnia gradacja (czerwona) przeznaczona do polerowania wstępnego tlenku cyrkonu i ceramiki.

Soczewka **GCR05** zawiera ziarno diamentowe zatopione w całym przekroju materiału, co zapewnia stałe właściwości polerujące. Idealnie nadaje się do nadawania satynowej gładkości dużym powierzchniom oraz ostatecznego wygładzania przed nabłyszczaniem końcowym.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje precyzyjną pracę bez bicia i wibracji. Jest to czwarty etap obróbki mechanicznej, kluczowy dla uzyskania wysokiej estetyki uzupełnień protetycznych.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępne polerowanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Wygładzanie ceramiki prasowanej i warstwowej
- ✓ Usuwanie mikro-rys po gradacji niebieskiej
- ✓ Nadawanie gładkości rozległym konstrukcjom mostów i koron

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: czerwona (średnia)
- ☐ Kształt: soczewka na trzymadełku
- ☐ Średnica: 20 mm / Grubość: 2 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym