


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcr14-czerwona-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-srednia-dysk-12-mm-p-486.html>

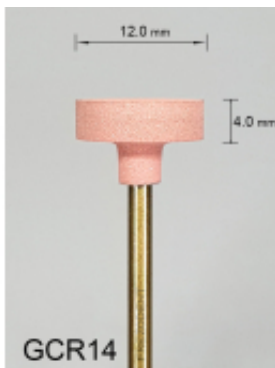

## Gumka diamentowa GCR14 (czerwona) do cyrkonu i ceramiki – gradacja średnia, dysk 12 mm

Cena	<b>45,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GCR14</b>

### Opis produktu

**Gumka diamentowa GCR14** – średnia gradacja (czerwona) przeznaczona do polerowania wstępnego tlenku cyrkonu i ceramiki.

Dysk **GCR14** zawiera ziarno diamentowe zatopione w całym przekroju materiału, co zapewnia stałe właściwości polerujące. Idealnie nadaje się do nadawania gładkości dużym powierzchniom oraz ostatecznego wygładzania przed nabłyszczaniem końcowym.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje precyzyjną pracę bez bicia i wibracji.

#### Zastosowanie:

- ✓ Wstępne polerowanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO<sub>2</sub>)
- ✓ Wygładzanie ceramiki
- ✓ Usuwanie mikro-rys po gradacji niebieskiej
- ✓ Nadawanie gładkości rozległym konstrukcjom mostów i koron

#### Specyfikacja:

- Gradacja: czerwona (średnia)
- Kształt: Dysk na trzymadełku
- Średnica: 12 mm / długość: 4 mm
- Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- Skład: spoiwo z ziarnem diamentowym