


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcr23-czerwona-do-cyrkonu-i-ceramiki-typ-sloneczko-srednica-26-mm-gradacja-srednia-p-491.html>

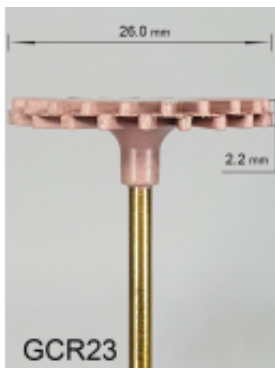

Gumka diamentowa GCR23 (czerwona) do cyrkonu i ceramiki – typ słoneczko, średnica 26 mm, gradacja średnia

| | |
|------------------|-----------------|
| Cena | 95,00 zł |
| Numer katalogowy | GCR23 |

Opis produktu

Gumka diamentowa GCR23 – średnia gradacja (czerwona) w formie elastycznego słoneczka do tlenku cyrkonu i ceramiki.

Profesjonalna polerka **GCR23** posiada elastyczne lamele nasyczone ziarnem diamentowym, co gwarantuje skuteczność aż do całkowitego zużycia. Kształt słoneczka pozwala na precyzyjne dotarcie do bruzd oraz zagłębień okluzyjnych, nadając powierzchni satynową gładkość bez ryzyka uszkodzenia delikatnych struktur anatomicznych.

Dzięki swojej elastyczności gumka nie przegrzewa materiału i doskonale dopasowuje się do kształtu koron i mostów. Jest to etap polerowania wstępnego, przygotowujący uzupełnienie do finalnego nabłyszczania.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępne polerowanie bruzd w tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Wygładzanie anatomicznych detali ceramiki i porcelany
- ✓ Nadawanie gładkości powierzchniom okluzyjnym
- ✓ Praca w trudnodostępnych miejscach bez naruszania morfologii

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: czerwona (średnia)
- ☐ Kształt: słoneczko / szczoteczka
- ☐ Średnica: 26 mm / Grubość: 2.2 mm
- ☐ Mocowanie: na trzymadełko (standard 2,35 mm)
- ☐ Skład: elastyczne spoiwo z ziarnem diamentowym