


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcy02-zolta-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-drobna-dysk-26-mm-p-493.html>

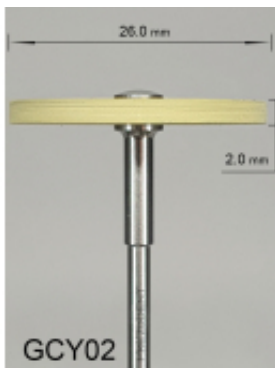

Gumka diamentowa GCY02 (żółta) do cyrkonu i ceramiki – gradacja drobna, dysk 26 mm

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	GCY02

Opis produktu

Gumka diamentowa GCY02 – drobna gradacja (żółta) przeznaczona do nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczny dysk **GCY02** posiada drobne ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co pozwala na uzyskanie wysokiej gładkości powierzchni. Jest to etap polerowania wykańczającego, który przygotowuje uzupełnienie do uzyskania końcowego, lustrzanego połysku bez ingerencji w nadany wcześniej kształt.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje idealne centrowanie i stabilną pracę. Jest to przedostatni etap obróbki mechanicznej w profesjonalnym systemie polerowania.

Zastosowanie:

- ✓ Nabłyszczanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Finalne wygładzanie ceramiki przed polerowaniem końcowym
- ✓ Zamykanie struktury powierzchni uzupełnień protetycznych
- ✓ Uzyskiwanie połysku na dużych powierzchniach

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: żółta (drobna)
- ☐ Kształt: dysk na trzymadełku
- ☐ Średnica: 26 mm / Grubość: 2 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z drobnym ziarnem diamentowym