


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcy14-zolta-do-cyrkonu-i-ceramiki-gradacja-drobna-dysk-12-mm-p-500.html>

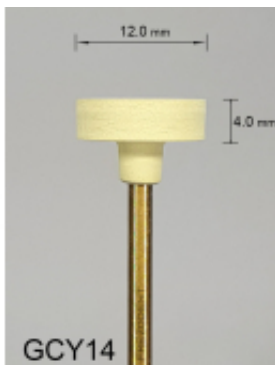

## Gumka diamentowa GCY14 (żółta) do cyrkonu i ceramiki – gradacja drobna, dysk 12 mm

Cena	<b>45,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GCY14</b>

### Opis produktu

**Gumka diamentowa GCY14** – drobna gradacja (żółta) przeznaczona do nabłyszczania tlenku cyrkonu i ceramiki.

Specjalistyczny dysk **GCY014** posiada drobne ziarno diamentowe zatopione w spoiwie, co pozwala na uzyskanie wysokiej gładkości powierzchni. Jest to etap polerowania wykańczającego, który przygotowuje uzupełnienie do uzyskania końcowego, lustrzanego połysku bez ingerencji w nadany wcześniej kształt.

Fabryczne osadzenie na **trzymadełku** gwarantuje idealne centrowanie i stabilną pracę. Jest to przedostatni etap obróbki mechanicznej w profesjonalnym systemie polerowania.

#### Zastosowanie:

- ✓ Nabłyszczanie powierzchni tlenku cyrkonu (ZrO<sub>2</sub>)
- ✓ Finalne wygładzanie ceramiki przed polerowaniem końcowym
- ✓ Zamykanie struktury powierzchni uzupełnień protetycznych
- ✓ Uzyskiwania połysku na dużych powierzchniach

#### Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: żółta (drobna)
- ☐ Kształt: dysk na trzymadełku
- ☐ Średnica: 12 mm / Grubość: 4 mm
- ☐ Mocowanie: trzymadełko 2,35 mm
- ☐ Skład: spoiwo z drobnym ziarnem diamentowym