


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/niebieska-gumka-na-trzymadelku-g07-p-441.html>

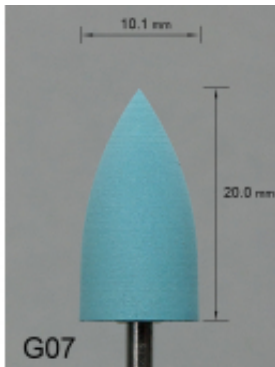

Niebieska gumka na trzymadełku G07

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G07

Opis produktu

Gumka protetyczna G07 niebieska o drobnej gradacji – kształt stożkowy.

Gumka polerska dedykowana do końcowych etapów obróbki w pracowni techniki dentystycznej z drobnym nasypem (kolor niebieski) jest niezwykle uniwersalny – doskonale sprawdza się przy wygładzaniu powierzchni ceramiki, jak również przy precyzyjnym wykańczaniu płyt protez wykonanych z akrylu oraz materiałów elastycznych (nylon, acetal).

Dzięki stożkowej formie o wymiarach 10,1 x 20,0 mm, narzędzie pozwala na bardzo dokładne opracowanie szczegółów anatomicznych oraz trudno dostępnych miejsc w uzupełnieniach protetycznych. Specjalna struktura gumy gwarantuje delikatne usuwanie mikrozarysowań, przygotowując powierzchnię materiału do uzyskania ostatecznego, wysokiego połysku bez ryzyka przegrzania podłoża.

Zastosowanie:

- ✓ Wykańczanie i wygładzanie ceramiki (polerki do ceramiki, porcelana)
- ✓ Opracowywanie materiałów elastycznych i termoplastycznych (nylon, acetal)
- ✓ Ostateczne wygładzanie akrylu przed polerowaniem na połysk
- ✓ Usuwanie śladów po wcześniejszych etapach obróbki i mikrozarysowań

Specyfikacja:

- ▣ Gradacja: drobna
- ▣ Kolor: niebieski
- ▣ Kształt: stożek
- ▣ Średnica robocza: 10,1 mm
- ▣ Długość robocza: 20,0 mm
- ▣ Trzpień: 2,35 mm