


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/rozowa-gumka-na-trzymadelku-g15-p-436.html>

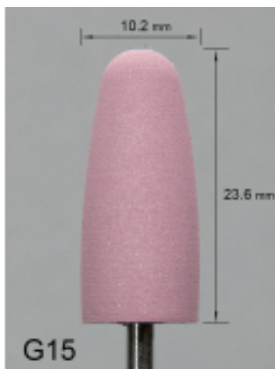

Różowa gumka na trzymadełku G15

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G15

Opis produktu

Gumka protetyczna G15 różowa – kształt długa oliwka o wszechstronnym zastosowaniu.

Profesjonalna polerka, która łączy w sobie dwie funkcje w zależności od twardości obrabianego podłoża. W pracy z twardą ceramiką i porcelaną pełni rolę instrumentu o średniej gradacji, idealnego do wygładzania powierzchni po szlifowaniu. Z kolei w przypadku akrylu oraz materiałów elastycznych (nylon, acetal), działa jako drobnoziarnista polerka wykańczająca.

Dzięki stożkowej formie (10,2 x 23,6 mm) narzędzie precyzyjnie dopasowuje się do modelowanej anatomii, pozwalając na płynne przejście między bruzdami a guzkami. Specjalna struktura spoiwa gwarantuje, że gumka nie "zapycha się" podczas pracy z materiałami termoplastycznymi i nie przegrzewa delikatnej struktury porcelany, zapewniając idealnie przygotowaną powierzchnię pod finalny połysk.

Zastosowanie:

- ✓ Średnia obróbka ceramiki (polerki do ceramiki, wygładzanie porcelany)
- ✓ Wykańczanie akrylu i protez (drobna gradacja do akrylu)
- ✓ Opracowywanie materiałów elastycznych (polerowanie nylonu i acetalu)
- ✓ Precyzyjne wygładzanie powierzchni okluzyjnych i brzegów protez

Specyfikacja:

- Gradacja: średnia (ceramika) / drobna (akryl, elastyczne)
- Kolor: różowy
- Kształt: długa oliwka
- Średnica robocza: 10,2 mm
- Długość robocza: 23,6 mm
- Trzpień: 2,35 mm

