


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/zielona-gumka-na-trzymadelku-g03-p-420.html>

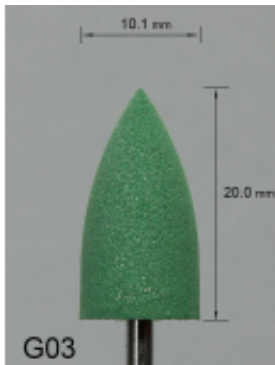

Zielona gumka na trzymadełku G03

Cena	7,00 zł
Numer katalogowy	G03

Opis produktu

Gumka protetyczna G03 zielona o drobnej gradacji – kształt stożkowy.

Profesjonalna polerka stomatologiczna przeznaczona do precyzyjnego wykańczania prac protetycznych wykonanych z akrylu. Służy do ostatecznego wygładzania powierzchni, eliminując najdrobniejsze nierówności i przygotowując materiał do polerowania na wysoki połysk.

Dzięki precyzyjnemu kształtowi stożka o wymiarach 10,1 x 20,0 mm, instrument pozwala na bardzo dokładne operowanie w zagłębieniach płyt protez oraz w okolicach elementów retencyjnych. Specjalna struktura gumy zapewnia delikatny kontakt z materiałem, co zapobiega powstawaniu niepożądanych wgłębień i przegrzewaniu akrylu podczas pracy.

Zastosowanie:

- ✓ Wykańczanie powierzchni akrylowych (polerki do akrylu, wygładzanie)
- ✓ Wstępne nabłyszczanie płyt protez akrylowych
- ✓ Usuwanie mikrozarysowań po średnich gradacjach gumek
- ✓ Prace wykończeniowe w technice akrylowej i termoplastycznej

Specyfikacja:

- ▣ Gradacja: drobna
- ▣ Kolor: zielony
- ▣ Kształt: stożek
- ▣ Średnica robocza: 10,1 mm
- ▣ Długość robocza: 20,0 mm
- ▣ Trzpień: 2,35 mm