


Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/zielona-gumka-na-trzymadelku-g38-p-454.html>

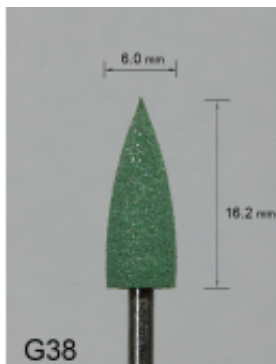

Zielona gumka na trzymadełku G38

Cena **7,00 zł**

Numer katalogowy **G38**

Opis produktu

Gumka protetyczna G38 zielona o bardzo grubej gradacji – kształt stożkowy.

Specjalistyczna polerka przeznaczona do intensywnego i szybkiego usuwania naddatków materiału. Charakteryzuje się bardzo grubą gradacją, która idealnie sprawdza się podczas wstępnego opracowywania płyt protez wykonanych z akrylu oraz materiałów elastycznych, takich jak nylon czy acetal.

Konstrukcja narzędzia w kształcie stożka o wymiarach 6,0 x 16,2 mm zapewnia wysoką wydajność przy zgrubnym wyrównywaniu powierzchni oraz modelowaniu bazy protezy. Gumka pozwala na szybkie usunięcie śladów po frezach, przygotowując materiał do dalszych etapów wygładzania bez ryzyka jego deformacji.

Zastosowanie:

- ✓ Agresywna obróbka wstępna akrylu (zgrubne szlifowanie protez)
- ✓ Opracowywanie materiałów elastycznych i termoplastycznych (nylon, acetal)
- ✓ Szybkie wyrównywanie powierzchni i usuwanie naddatków materiału
- ✓ Wstępne formowanie anatomicznych kształtów protez

Specyfikacja:

- Gradacja: bardzo gruba
- Kolor: zielony
- Kształt: stożek
- Średnica robocza: 6,0 mm
- Długość robocza: 16,2 mm
- Trzpień: 2,35 mm